

Raucodrape®

Sicherheit und Komfort für das OP-Team und den Patienten

Die Innovationen im Raucodrape® OP-Abdecksystem

Raucodrape OP-Produkte überzeugen durch sehr gute Materialien, hohe Sicherheit und innovative Serviceleistungen.

Raucodrape®

- bietet eine große Auswahl an Sets und Einzelprodukten
- optimiert die Abläufe im OP, senkt die Prozesskosten
- für die Herstellung der Raucodrape Produkte wird Naturkautschuklatex nicht als Rohstoff eingesetzt

L&R bietet eine breite Auswahl an verschiedenen Materialien und verwendet für das Sortiment an OP-Abdeckungen die folgenden Bezeichnungen:

Raucodrape® PRO 2-lagig

2-lagiges Material für OPs mit normalem Flüssigkeitsanfall

Raucodrape® PRO 2-lagig Plus

2-lagiges Material mit einer Verstärkung für OPs mit hohem Flüssigkeitsanfall

Raucodrape® Abdecktücher

2-lagiges Material für kleine Eingriffe




Raucodrape® PRO OP-Abdecksystem High Performance für den OP

Die Raucodrape PRO OP-Abdeckungen bieten High-Performance für Ihren OP und schaffen Sicherheit in jeder Lage. Die spezielle Kombination der zwei Schichten aus PP*-Vlies und PE*-Folie ist vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig. Sie gewährleistet Reißfestigkeit bei gleichzeitig hoher Flexibilität und bietet somit eine hohe Anwendersicherheit im OP.

Ihre Vorteile mit Raucodrape PRO 2-lagig

- für OPs mit niedrigem bis mittlerem Flüssigkeitsanfall
- vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm
- übertrifft die Anforderungen der DIN EN 13795
- Einsatz von naturkautschuklatexfreien Rohstoffen

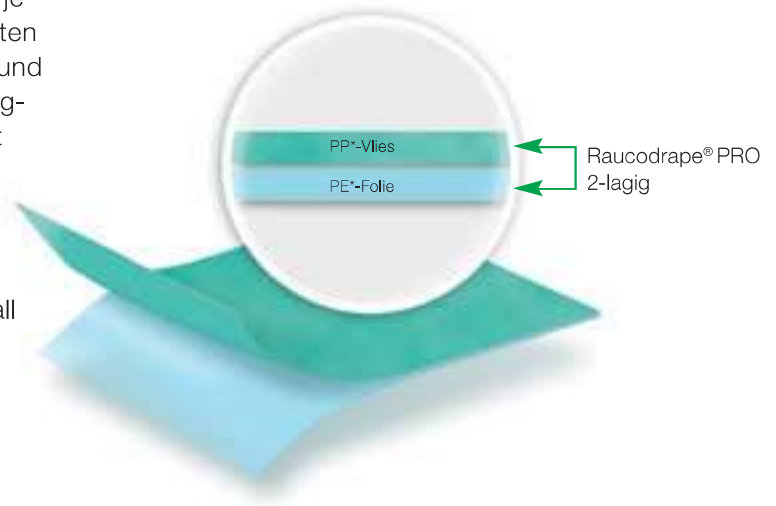


Raucodrape® PRO 2-lagig Plus Ein Plus im High-Performance-Standard

Ein Plus für OPs mit hohem Flüssigkeitsanfall.

Ihre zusätzlichen Vorteile mit Raucodrape PRO 2-lagig Plus

- verstärkte OP-Zone mit zusätzlicher Vlieslage
- hohe Saugfähigkeit
- hervorragende Sauggeschwindigkeit
- sehr hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm
- übertrifft die Anforderungen der DIN EN 13795
- Einsatz von naturkautschuklatexfreien Rohstoffen

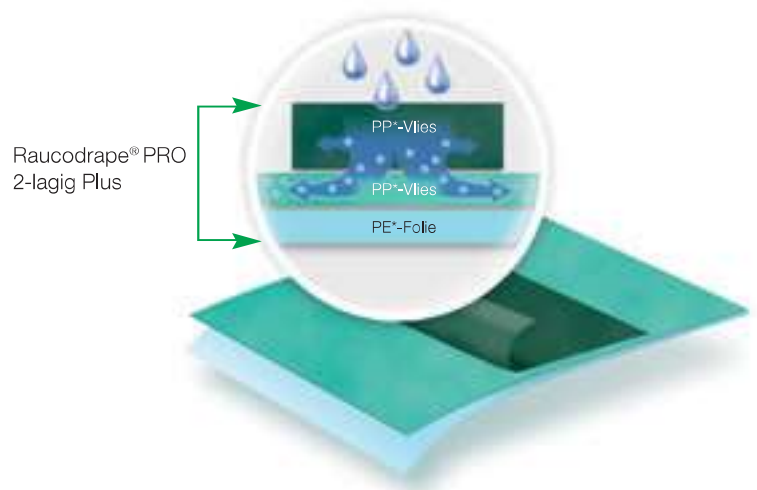

* PE: Polyethylen, PP: Polypropylen

Raucodrape®

Starke Lösungen bis ins Detail – dafür steht das Raucodrape® Sortiment

Raucodrape® vereinfacht und beschleunigt die Entfaltung


Raucodrape OP-Abdeckungen sind anwenderfreundlich gefaltet. Jede Tuchart hat, abgestimmt auf das Einsatzgebiet, eine eigene Faltsystematik, die eine sichere Anwendung ermöglicht und die Entfaltung weiter vereinfacht und beschleunigt. Bei allen selbstklebenden Lochtüchern ist der OP-Ausschnitt bereits vor der Entfaltung sichtbar. Dies erleichtert die korrekte Applikation am Patienten wesentlich.

Selbsterklärende Piktogramme

Für Sicherheit und Schnelligkeit bei der Entfaltung sorgen auch die schnell verständlichen Piktogramme. Auf einen Blick zeigen sie z. B. die Entfaltungsrichtung, den ersten Entfaltungsschritt, die Positionierung von Tüchern am Patienten, Schlitzöffnungen, integrierte Beinlinge und vieles mehr.

Dreiteilige Klebestreifen

Alle Schlitztücher sind mit einem ergonomisch sinnvollen dreiteiligen Klebestreifen ausgestattet, der die Applikation noch einfacher macht. Zahlreiche Klebetücher haben einen verlängerten Klebestreifen für adipöse Patienten. Alle Klebestreifen sind mit einem 2 cm langen Fingerlift versehen und dadurch schnell und sicher zu greifen.

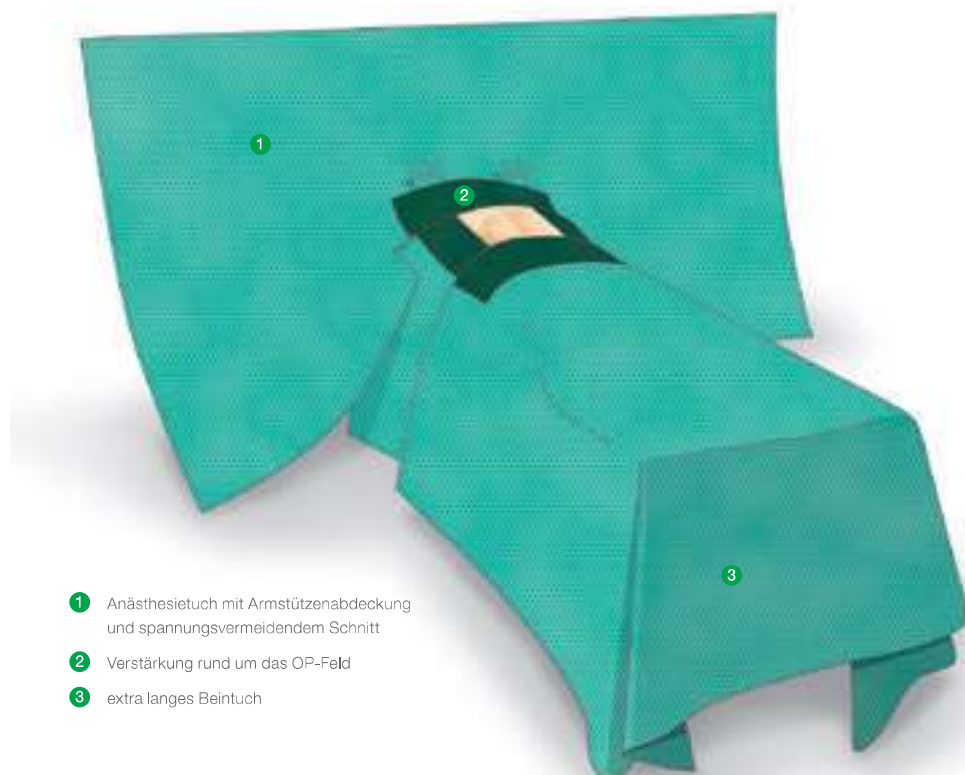

- 1 Anästhesietuch mit Armstützenabdeckung und spannungsvermeidendem Schnitt
- 2 Verstärkung rund um das OP-Feld
- 3 extra langes Beintuch

Raucodrape®

Ein durchdachtes Verpackungskonzept für mehr Transparenz und Sicherheit

Solider Schutz und zuverlässiges Handling

Ein durchdachtes modulares Verpackungssystem gewährleistet die erforderliche Sicherheit – während des Transportes, im Lager, bis hin zur Anwendung im OP. Die zweckmäßige Verpackung mit durchgängig einheitlicher und eindeutiger Inhaltskennung und EAN-Code 128 auf allen Verpackungsstufen vereinfacht die Logistiksteuerung und das sichere Handling der Produkte.

Robuste Transport- und Lagerkartonage

Die Transport- und Lagerkartonagen aus recycelbarem Material schützen zuverlässig vor Beschädigungen.

Praktische Spenderverpackung

Alle Einzelprodukte sind in einer wiederverschließbaren Faltschachtel mit Spenderöffnung verpackt. Sie ermöglicht eine effiziente Lagerhaltung und den schnellen Zugriff auf die einzeln steril verpackten Produkte. Raucodrape-Sets sind in einen PE-Beutel gepackt.



Peelfähige Verpackungen in allen Formaten


Raucodrape OP-Abdeckungen sind in anwenderfreundlichen Peilverpackungen verpackt. Sie sind mit einem Handgriff zu öffnen und erleichtern die sichere und schnelle Entnahme der Sterilprodukte.

Alles Wichtige auf einen Blick

Die Kennzeichnung aller Produkte ist klar und eindeutig. Für die visuelle und textliche Inhaltsdarstellung bis zur Bereitstellung aller weiteren erforderlichen Hinweise gilt immer: Alle Informationen sind gut lesbar und schnell verständlich.

Doppelte Dokumentationsetiketten

Jede Peilverpackung ist mit doppelten selbstklebenden Dokumentationsetiketten für eine schnelle und zuverlässige Dokumentation im OP-Bericht ausgestattet.

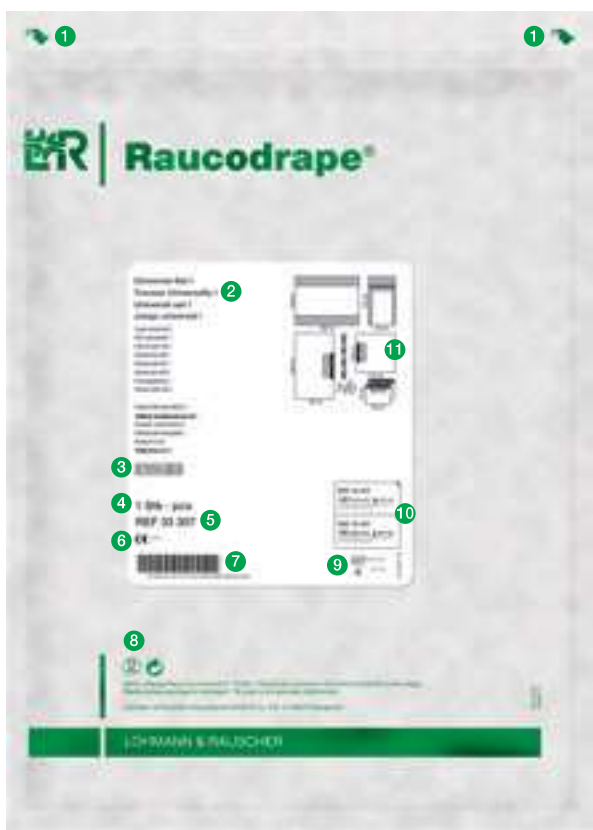

- 1 Hinweis zur Peelrichtung
- 2 Produktbezeichnung in 19 Sprachen
- 3 „STERIL“-Symbol inkl. Sterilisationsverfahren
- 4 Mengenangabe
- 5 Artikelnummer
- 6 CE-Kennzeichnung
- 7 EAN-Code 128
- 8 Symbol „nur zum Einmalgebrauch“
- 9 Chargennummer, Haltbarkeitsdatum
- 10 zwei selbstklebende Dokumentationsetiketten
- 11 Produktabbildung, Produktabmessungen

Raucodrape OP-Abdecksystem
Farblgende
Materialien und Produktdetails

Auf den folgenden Seiten sind alle OP-Abdecktücher grafisch dargestellt. Unterschiedliche Farbflächen und Symbole kennzeichnen die verwendeten Materialien und weisen auf besondere Details des jeweiligen OP-Tuches hin.

Die Grafik zeigt jeweils den Blick auf die patientenabgewandte Seite. Zur Vervollständigung der Informationen sind die patientenzugewandt eingearbeiteten Klebestreifen als rote Linien eingezeichnet. So haben Sie schnell einen guten Überblick über verwendete Materialien und Besonderheiten.

-  Raucodrape PRO 2-lagig
Raucodrape PRO 3-lagig
-  Raucodrape PRO 2-lagig Plus
-  Einschlagtuch
-  Abdecktuch
-  Inzisionsfolie
-  elastische Manschette
-  PE-Folie, transparent
-  PE-Folie, türkis
-  Handtücher
-  Vliesauflage Instrumententischbezug,
Vliesauflage OP-Tischabdeckung
-  Klebestreifen
-  flüssigkeitsabweisender
Vliesstoff
-  flüssigkeitsabsorbierender
Vliesstoff
-  Siebeinsatz
-  Klettverschluss
-  Bügeldraht